


# medbar®

## Damla Ayar Seti

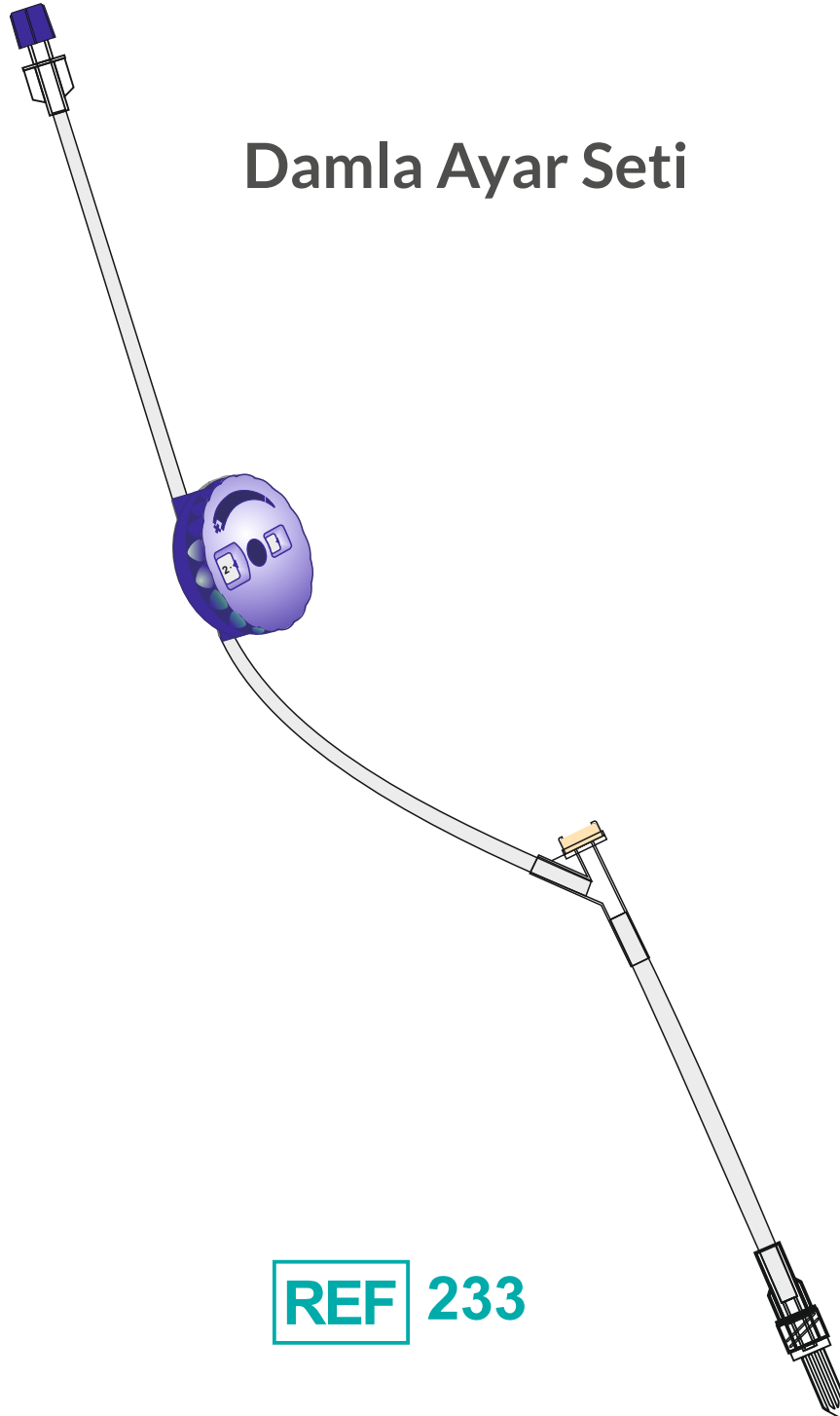

REF 233

CE 1014



STERILE EO



## Damla Ayar Setinin Kolaylıkları

### Kalite

- \* ISO 13485:2012 kalite yönetim standardı koşullarında üretilmiştir.
- \* CE sertifikasına sahiptir.

### Güvenlik

- \* Yeni başlayanlar için kullanımı kolaydır.
- \* Açık/Kapalı modu bulunmaktadır.

### Bio-Uyumluluk

- \* Etilen oksit ile steril edilmiştir.
- \* Latex içermez.
- \* Ftalat içermez.

### Uyarılar

- \* İnfüzyon kabının (şişe ya da torba) damla odası sıvı seviyesi hastanın orta ekseninin yaklaşık 50 cm yukarısında olacak şekilde asın.
- \* %0.9'luk izotonik çözülden farklı bir sıvı kullanıldığında kullanıcı tarafından akış hızı kalibre edilmelidir.

### Raf Ömrü


- \* 5 yıl.



Damla Ayar Seti yerçekimi ilkesi ile çalışan sıvı akış ayarlayıcısıdır. Skala değerinden sapma miktarı maksimum +/- %10 dur.

Ayar düğmesi saat yönünde çevrildiğinde akış hızı azalır, saat yönünün ters yönünde çevrildiğinde akış hızı artar.

Vizkozitesi (akışkanlığı) farklı sıvılarda akış hızları da farklı olacaktır. Bu nedenle %0.9'luk izotonik çözülden farklı bir sıvı kullanıldığında sağlık personeli tarafından akış hızı kalibre edilmelidir.

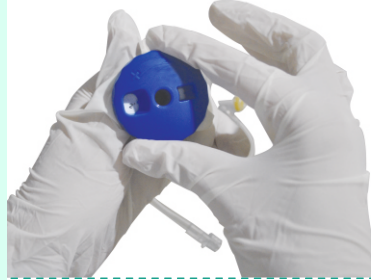

REF NO	ÜRÜN ADI	ÖZELLİKLER	STERİLİZASYON	AMBALAJ
23301	Damla Ayar Seti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yerçekimi ile çalışan sıvı akış ayarlayıcı.</li> <li>• Renkli akış ayarlayıcı gövde.</li> <li>• Saatte 2 - 350 ml ölçüm aralığı.</li> <li>• Sabit akış hızı.</li> <li>• Dişi ve erkek üniversal bağlantı parçaları.</li> <li>• Y-port.</li> <li>• Toplam uzunluk: 45 cm.</li> <li>• Kullanımı kolaydır.</li> </ul>	ETO	100 adet / iç kutu 600 adet / koli Koli ebat: 50*70*38 cm Koli ağırlık: 16,20 kg